



EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2025 ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu**
Oznaczenie arkusza: **MED.05-02-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MED.05**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 -

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Karta pacjenta

Uwaga! W R.1.2, R.1.5 i R.1.9 dopuszcza się stosowanie innych zapisów poprawnych merytorycznie

1	zapisane w pozycjach Imię: Stanisława Nazwisko: Piątkowska , Data urodzenia: 12.08.1945 r.						
2	w pozycji Doświadczenie w noszeniu aparatów słuchowych, zgłaszane problemy, oczekiwania pacjentki zapisane: - nigdy nie używała aparatów słuchowych (brak doświadczenia w noszeniu aparatów), - chce kupić dwa aparaty, - źle słyszy TV i radio, - nie słyszy dzwonka do drzwi, - oczekuje aparatów łatwych w obsłudze, - oczekuje aparatów niedrogich, - przestała być samodzielna, <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeśli zapisane jest co najmniej pięć elementów z powyższych.</i>						
<i>w pozycji Ucho prawe - analiza audiogramów zapisane:</i>							
3	niedosłuch odbiorczy i niedosłuch umiarkowany						
4	wartość ubytku słuchu: 66,25 dB						
5	próg detekcji sygnału mowy (SDT): 70 dB SPL , ubytek dyskryminacji mowy (DL): 40 %						
6	brak rezerwy ślimakowej, ubytek symetryczny, presbyacsis lub głuchota starcza						
<i>w pozycji Ucho lewe - analiza audiogramów zapisane:</i>							
7	niedosłuch odbiorczy i niedosłuch umiarkowany						
8	wartość ubytku słuchu: 63,75 dB						
9	brak rezerwy ślimakowej, ubytek symetryczny, presbyacsis lub głuchota starcza						
10	próg detekcji sygnału mowy (SDT): 70 dB SPL , ubytek dyskryminacji mowy (DL): 50 %						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Karta doboru aparatów słuchowych i wkładek usznych

Uwaga! W R.2.3 - R.2.6 i R.2.8 dopuszcza się stosowanie innych zapisów poprawnych merytorycznie

1	wybrany został aparat numer 1 na ucho prawe						
2	wybrany został aparat numer 1 na ucho lewe						
3	w uzasadnieniu doboru aparatów słuchowych zapisane: zakres dopasowania aparatów obejmuje zakres ubytku słuchu pacjentki						
4	bateria 13 świadczy o większym aparacie, łatwość obsługi						
5	niewielka ilość kanałów - świadczy o niedrogim aparacie						
6	niewielka ilość programów - świadczy o niedrogim aparacie						
7	zostały wybrane wkładki uszne numer 1 lub 2 na ucho prawe i numer 1 lub 2 na ucho lewe - numery wkładek są jednakowe dla obu uszu						
8	w uzasadnieniu doboru wkładki usznej zapisane: wkładki odpowiednie do ubytku słuchu i dobranych aparatów BTE, wkładka łatwa w obsłudze i pielęgnacji						
9	wybrana wentylacja we wkładkach usznych mieści się w przedziale 1,0 mm ÷ 1,4 mm i jednakowa dla obu wkładek						

Rezultat 3: Instrukcja pielęgnacji dobranych aparatów słuchowych i wkładek usznych

Instrukcja w dowolnej kolejności zawiera informacje o:

1	ochronie aparatów przed wilgocią lub zdejmowanie aparatów w sytuacjach, grożących ich zawilgoceniem np. kąpiel, deszcz						
2	osuszaniu aparatów z wykorzystaniem kapsuł osuszających lub osuszających urządzeń/pojemników elektronicznych						
3	wyłączaniu nieużywanych aparatów lub wyjmowaniu baterii						
4	ochronie aparatów i wkładek przed uszkodzeniem mechanicznym						
5	ochronie aparatów przed uszkodzeniem termicznym lub unikanie źródeł ciepła						
6	czyszczeniu aparatów specjalnymi chusteczkami						
7	czyszczeniu wkładek specjalnymi chusteczkami lub o myciu specjalnymi środkami pielęgnacyjnymi						
8	osuszaniu wkładek gruszką						

Numer
stanowiska

Rezultat 4: Audiogram wirtualnego pacjenta

1	krzywa progowa dla przewodnictwa powietrznego ucha prawego – wyniki badania zapisane w arkuszu są zgodne z audiogramem komputerowym otrzymanym przez zdającego i różnice pomiędzy krzywą wzorcową a zmierzoną nie przekraczają 5 dB						
2	krzywa progowa dla przewodnictwa kostnego ucha prawego – wyniki badania zapisane w arkuszu są zgodne z audiogramem komputerowym otrzymanym przez zdającego i różnice pomiędzy krzywą wzorcową a zmierzoną nie przekraczają 5 dB						
3	krzywa progowa dla przewodnictwa powietrznego ucha lewego – wyniki badania zapisane w arkuszu są zgodne z audiogramem komputerowym otrzymanym przez zdającego i różnice pomiędzy krzywą wzorcową a zmierzoną nie przekraczają 5 dB						
4	krzywa progowa dla przewodnictwa kostnego ucha lewego – wyniki badania zapisane w arkuszu są zgodne z audiogramem komputerowym otrzymanym przez zdającego i różnice pomiędzy krzywą wzorcową a zmierzoną nie przekraczają 5 dB						
5	symbole na sporządzonym audiogramie zapisanym w arkuszu są zgodne z audiogramem wzorcowym						

Rezultat 5: Odlew ucha

1	odlew ucha jest zakończony tamponikiem						
2	masa silikonowa nie przeszła za tamponik						
3	odlew ucha jest zgodny z długością odlewu wzorcowego						
4	masa silikonowa ma jednolity kolor i konsystencję						
5	masa silikonowa nie ma pęcherzyków powietrza						
6	odlew ucha jest estetycznie wykonany, tzn.: powierzchnia jest gładka, brak ubytków w masie i jest odcisnięta cała muszla małżowiny						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg procedury pobierania odlewu ucha

Zdający:

1	wykonał czynności – umył ręce, przygotował stanowisko, osłonił ubranie pacjenta. <i>Uwaga! Osłonięcie ubrania można wykonać najpóźniej przed włożeniem masy wyciskowej do ucha. Jeśli fantom ucha nie będzie miał ramienia, to czynność osłonięcia pacjenta nie wystąpi – kryterium należy uznać za spełnione</i>						
2	wykonał otoskopowanie zgodnie z zasadami BHP (asekuracja) przed wprowadzeniem tamponu						
3	wykonał tamponowanie – wybrał tampon, włożył go do przewodu słuchowego ręką lub przy pomocy pęsety, wsunął tampon do ucha za pomocą włączonej sztabki świetlnej						
4	wykonał otoskopowanie zgodnie z zasadami BHP (asekuracja) po tamponowaniu						
5	przygotował masę wyciskową dwuskładnikową – odmierzył jednakowe ilości obu składników za pomocą dwóch miarek, wymieszał masę w rękach lub przy użyciu szpatułki na podkładce do uzyskania jednolitego koloru i włożył masę do strzykawki						
6	wprowadzał powoli masę do ucha z zasadami BHP (asekuracja) – wypełniał przewód słuchowy oraz małżowinę, a koniec strzykawki przez cały czas wypełniania był zanurzony w masie						
7	wyjął wycisk po wcześniejszym sprawdzeniu twardości wycisku i odpowietrzeniu ucha						
8	wykonał otoskopowanie zgodnie z zasadami BHP (asekuracja) po wyjęciu wycisku						
9	włożył wycisk do przygotowanego woreczka i zdezynfekował sztabkę świetlną po wykonaniu odlewu ucha						
10	uporządkował stanowisko pracy – wyrzucił resztki masy wyciskowej do kosza, pojemniki z masami wyciskowymi pozostawił zamknięte, zdjął chustę zabezpieczającą ubranie pacjenta (jeśli jej użył)						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Przebieg procedury przeglądu aparatu słuchowego z indywidualną wkładką uszną

Uwaga!

Zdający wykonuje tę procedurę podczas zastygania masy wyciskowej. Podczas kontroli stanu technicznego aparatu zdający zachowuje ciszę, nie wypowiada żadnych słów na głos.

Zdający:

1	odłączył wkładkę od aparatu i umieścił w myjce ultradźwiękowej na 1 ÷ 3 minut						
2	osuszył wkładkę; usunął wodę z wentylacji i dźwiękowodu przy pomocy gruszki						
3	otworzył komorę baterii, wyjął, obejrzał baterię, sprawdził jej stan testerem, sprawdził styki wewnątrz komory baterii						
4	obejrzał obudowę aparatu w poszukiwaniu uszkodzeń mechanicznych						
5	odłączył różek od aparatu						
6	sprawił czy aparat nie ma zanieczyszczonych wlotów słuchawki i mikrofonu						
7	założył stetoklip na różek aparatu						
8	osłuchał aparat: włączył go, zmieniał programy i/lub regulował głośność potencjometrem						
9	połączył ponownie wkładkę z aparatem						
10	korzystał podczas przeglądu z lupy						

Uwagi:

Do wykonywania procedury pobrania odlewu ucha i przeglądu aparatu słuchowego.

Zdający podchodzi do wyznaczonego stanowiska zgodnie z harmonogramem zapisanym przez PZN na tablicy. Czas wykonania procedury pobrania odlewu ucha i przeglądu aparatu słuchowego nie powinien przekroczyć 20 minut*. Zdający ma możliwość jednokrotnego powtórzenia procedury pobrania odlewu ucha po uprzednim zgłoszeniu PZN. Po upływie przeznaczonego czasu PZN kieruje do zdającego komunikat „czas minął” oznaczający zakończenie procesu oceny.

* Istnieje możliwość przedłużenia czasu wykonania procedury do 25 minut, decyzję o przedłużeniu czasu podejmuje egzaminator.

Egzaminator


imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Audiogram wzorcowy do oceny Rezultatu 4:

Ucho prawe

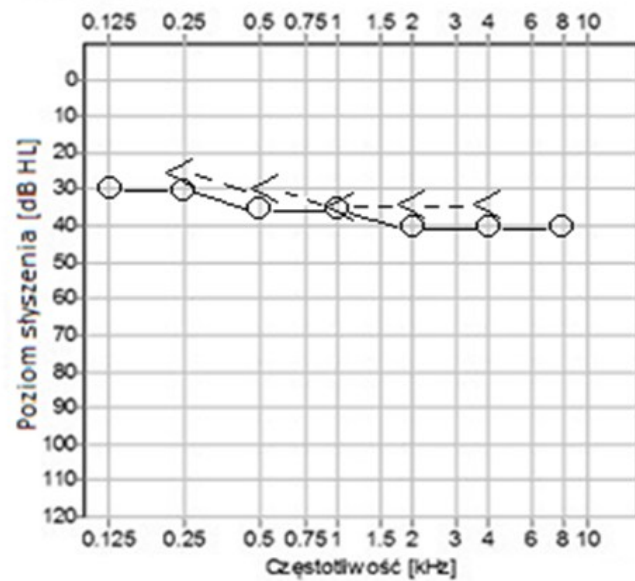

Ucho lewe

