

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2022
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-03-22.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1: Karta dekontaminacji***Wpisane:*

1	w kolumnie C: 93°C; w kolumnie E: nr 14						
2	w kolumnie G: nr 11, emulacyjny; w kolumnie H: nr 13						
3	w wierszu dla Zestawu I, w kolumnie D: nr 1, nr 2; w kolumnie F: nr 8, wieloparametrowy						
4	w wierszu dla Zestawu II, w kolumnie D: nr 1, nr 2; w kolumnie F: nr 3, zintegrowany						

Rezultat 2: Etykieta Zestaw I*Wpisane:*

1	Oddział: Chirurgia Plastyczna/Oddział Chirurgii Plastycznej						
2	Nazwa pakietu: Zestaw I do usunięcia szwów						
3	Data sterylizacji: data egzaminu						
4	Data przydatności: 2 lata lub 24 miesiące						
5	Ocena punktowa pakietu: 655						

Numer
stanowiska





Rezultat 3: Etykieta Zestaw II

Wpisane:

1	Oddział: Chirurgia Plastyczna/Oddział Chirurgii Plastycznej						
2	Nazwa pakietu: Zestaw II do założenia szwów						
3	Data sterylizacji: data egzaminu						
4	Data przydatności: 5 lat						
5	Ocena punktowa pakietu: 755						

Przebieg 1: Przebieg wykonania higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a

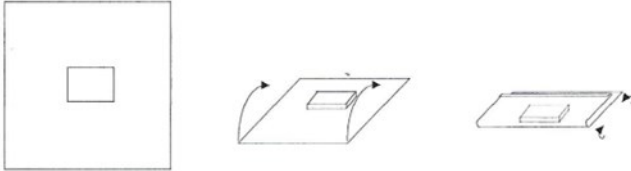
Zdający:

1	założył czepek, zakrywając nim wszystkie włosy, nie miał założonej biżuterii i zegarka, naniósł środek dezynfekcyjny na suchą dłoń/dłonie, wykonał ruch pocierania wewnętrznej powierzchni dłoni o dłoń minimum 5 razy 						
2	wykonał ruch: dłoń na dłoni, palce splecione, przesuwając palce jednej dłoni między palcami drugiej dłoni aż do zagłębienia międzypalcowych 						
3	wykonał ruch pocierania części wewnętrznej prawej dłoni o powierzchnię grzbietową lewej dłoni - zamiana rąk - minimum 5 razy każdą						
4	wykonał ruch pocierania grzbietowej powierzchni zgiętych palców jednej dłoni pod zgiętymi palcami drugiej dłoni - minimum 5 powtórzeń 						
5	wykonał ruch: kciuk prawej dłoni ujęty w lewą dłoń, wykonując ruchy obrotowe wokół kciuka - zamiana rąk - minimum 5 powtórzeń każdy kciuk 						
6	wykonał ruch okrężnego pocierania opuszków palców prawej dłoni w zagłębieniu dłoniowym lewej dłoni, zmiana dłoni - minimum 5 powtórzeń każda dłoń						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Przygotowanie do sterylizacji Zestawu I - do usunięcia szwów

Zdający:

1	z zestawu narzędzi znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym wybrał pęsetę anatomiczną i nożyczki chirurgiczne						
2	pod lampą z lupą/lampą powiększającą przeprowadził wzrokową kontrolę czystości nożyczek chirurgicznych, pęsety anatomicznej						
3	wykonał konserwację nożyczek chirurgicznych nanosząc preparat konserwujący w miejsce przegubu narzędzia, wykonując kilkakrotnie ruch zamykania i otwierania, w przypadku nadmiaru preparatu usunął go kompresem gazowym						
4	wykonał test funkcyjny dla nożyczek chirurgicznych wykonując minimum 3 niezależne cięcia na kompresie gazowym, następnie ostrze zabezpieczył osłonką						
5	na tacy metalowej ułożył nożyczki chirurgiczne i pęsetę anatomiczną umieszczając części chwytne narzędzi po tej samej stronie oraz wskaźnik wieloparametrowy typ 4						
6	umieścił tackę metalową wraz z narzędziami na środku arkusza papieru krepowanego i frontową stroną papieru przykrył zestaw 						
7	tylną stroną papieru krepowanego wywinął do przodu, brzegi papieru krepowanego odwinął na zewnątrz, papier kończy się z przodu na górnym brzegu 						
8	papier założył na brzegach i wywinął na wierzch tacki metalowej 						
9	zastosował do zapakowania równoległego dwa niezależne arkusze papieru krepowanego, dla każdego powtarzając te same elementy etapu pakowania						
10	papier warstwy zewnętrznej umocował za pomocą taśmy, do kontroli procesu zastosował taśmę wskaźnikową, na pakiet przykleił Etykietę dla Zestawu I						

Numer stanowiska							

Przebieg 3: Przygotowanie do sterylizacji Zestawu II do założenia szwów							
Zdający:							
1	z narzędzi znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym wybrał: igłotrzymacz i kleszczyki Pean						
2	wykonał wzrokową kontrolę czystości igłotrzymacza i kleszczyków Pean						
3	wykonał konserwację kleszczyków Pean nanosząc preparat konserwujący w miejsce przegubu narzędzia, wykonując kilkakrotnie ruch otwierania i zamykania, w przypadku nadmiaru preparatu usunął go kompresem gazowym						
4	narzędzia umieścił w rękawie papierowo-foliowym, części robocze skierował w tym samym kierunku, do kontroli pakietu zastosował wskaźnik zintegrowany typ 5						
5	wykonał zgrzew rękawa papierowo-foliowego pierwszej warstwy, przeprowadził wzrokową kontrolę zgrzewu						
6	pakiet z narzędziami zapakował w drugą warstwę rękawa papierowo-foliowego umieszczając część chwytłą narzędzi po stronie otwierania pakietu						
7	pakiet z narzędziami w pierwszej warstwie rękawa zapakował w drugą warstwę rękawa nie zawijając brzegów pierwszej warstwy, folia do folii, papier do papieru, wykonał zgrzew						
8	na pakiet przykleił Etykietę dla Zestawu II						
9	uporządkował stanowisko egzaminacyjne, zdezynfekował powierzchnię blatu, odpady usunął do kosza pojemnika na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis