

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2023
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-02-23.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji maszynowej

wpisane w kolumnie:

1	A: pęseta chirurgiczna, pęseta anatomiczna, nożyczki chirurgiczne/nożyczki, igłotrzymacz/imadło, kleszczyki Kocher, kleszczyki Pean						
2	B: w sześciu wierszach - 1 szt.						
3	C: MD nr 2 / 1084						
4	D: A0 ≥ 6000						
5	D: Temperatura 93°C, Czas 10 minut						
6	E: nr 8						
7	F: nr 1						
8	G: nr 7						
9	H: nr 4						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Karta sterylizacji parowej*wpisane w wierszu:*1 Parametry procesu sterylizacji: czas: **5,3 min***wpisane w kolumnie:*2 **A dla Zestawu I:** kleszczyki Kocher, kleszczyki Pean, igłotrzymacz/imadło3 **A dla Zestawu II:** pęseta chirurgiczna, pęseta anatomiczna4 **A dla Zestawu III:** nożyczki chirurgiczne/nożyczki5 **B dla Zestawu III:** nr 66 **C dla Zestawu III:** nr 127 **D dla Zestawu II:** nr 148 **E dla Zestawu II:** nr 39 **F dla Zestawu I:** nr 510 **G dla Zestawu I:** nr 11**Rezultat 3: Etykiety dla Zestawów I, II, III**1 Etykieta dla Zestawu I *wpisane w wierszach:*
Odbiorca: Blok Operacyjny, **Data ważności pakietu:** 6 miesięcy od daty egzaminu w układzie dd-mm-rrrr +/- 2 dni2 Etykieta dla Zestawu II *wpisane w wierszach:*
Odbiorca: Oddział Laryngologiczny, **Data ważności pakietu:** 2 lata od daty egzaminu w układzie dd-mm-rrrr +/- 2 dni3 Etykieta dla Zestawu III *wpisane w wierszach:*
Odbiorca: Izba Przyjęć, **Data ważności pakietu:** 2 miesiące od daty egzaminu w układzie dd-mm-rrrr +/- 2 dni

Numer
stanowiska

Rezultat 4: Pakiety z Zestawami I, II, III
do oceny kryteriów R.4.1-R.4.4 może zachodzić konieczność otwarcia pakietów

Pakiet z Zestawem I

1	wewnątrz pakietu znajdują się: igłotrzymacz, kleszczyki Kocher, kleszczyki Pean						
2	wszystkie narzędzia są zapięte na pierwszy zamek zapadki lub otwarte						
3	uchwyty wszystkich narzędzi skierowane są w tym samym kierunku						
4	wewnątrz pakietu znajduje się wskaźnik chemiczny emulacyjny (typu 6)						
5	pakiet zaklejony jest taśmą ze wskaźnikiem						

Pakiet z Zestawem II

6	wewnątrz pakietu znajdują się: pęseta anatomiczna oraz pęseta chirurgiczna						
7	uchwyty pęset skierowane są zgodnie z kierunkiem otwierania, od strony otwarcia pozostawiony jest margines do aseptycznego otwarcia, zgrzewy obu warstw pakietu są ciągłe na całej szerokości bez kanałów i rys, na pakiecie nie ma plam pochodzących z oleju do konserwacji narzędzi						
8	wewnątrz pakietu znajduje się wskaźnik chemiczny zintegrowany (typu 5)						

Pakiet z Zestawem III:

9	wewnątrz pakietu znajdują się nożyczki chirurgiczne, ostrza nożyczek zabezpieczone są osłonką, uchwyty nożyczek skierowane są zgodnie z kierunkiem otwierania pakietu, od strony otwarcia pozostawiony jest margines do aseptycznego otwarcia, zgrzewy pakietu są ciągłe na całej szerokości bez kanałów i rys, na pakiecie nie ma plam pochodzących z oleju do konserwacji narzędzi						
10	wewnątrz pakietu znajduje się wskaźnik chemiczny wieloparametrowy (typu 4)						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a i przygotowanie narzędzi do sterylizacji

Zdający:


1	założył czepek, zakrywając nim włosy, na dłoniach i nadgarstkach nie miał założonej żadnej biżuterii ani zegarka						
2	naniósł środek dezynfekcyjny na dłoń/dłonie, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk wg Ayliffe'a, powtarzając każdy etap pięciokrotnie, w jednym z etapów pocierał wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi palcami						
3	wykonał pod lampą powiększającą wzrokową kontrolę czystości sześciu sztuk narzędzi						
4	po sprawdzeniu czystości naniósł olej do konserwacji narzędzi na przeguby: nożyczek chirurgicznych, igłotrzymacza, kleszczyków Kocher oraz kleszczyków Pean						
5	wykonał kilkakrotnie ruchy zamykania i otwierania każdym narzędziem przegubowym						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Pakowanie tacy z Zestawem I we włókninę sterylizacyjną oraz Zestawów II i III w opakowania papierowo-foliowe

Zdający:

Pakowanie tacy z Zestawem I we włókninę sterylizacyjną
(Ilustracja: Instrukcja pakowania tacy z Zestawem I)

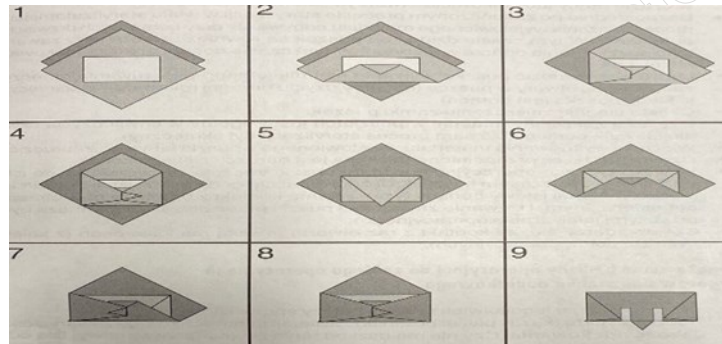

1	rozłożył na blacie stołu dwa arkusze włókniny sterylizacyjnej w dwóch różnych kolorach, umieścił tacę z Zestawem I po przekątnej na środku pierwszego arkusza włókniny sterylizacyjnej (instrukcja pakowania etap 1)						
2	zawinął pierwszy arkusz zakrywając tacę, wykonał etapy: 2, 3, 4 instrukcji pakowania, po zakończeniu pakowania pierwszej warstwy pozostawił wypustkę z włókniny ułatwiającą aseptyczne otwarcie pakietu, nie zakleił pierwszej warstwy opakowania taśmą (instrukcja pakowania etap 5)						
3	tacę narzędziową zapakowaną w pierwszy arkusz włókniny sterylizacyjnej umieścił po przekątnej drugiego arkusza włókniny (instrukcja pakowania etap 5) i zawinął zakrywając drugą warstwę włókniny tacę narzędziową wykonał etapy: 6, 7, 8 instrukcji pakowania, po zapakowaniu pozostawił wypustkę z jednego z narożników włókniny, ułatwiającą aseptyczne otwarcie pakietu, zakleił pakiet taśmą ze wskaźnikiem (instrukcja pakowania etap: 9)						

Numer
stanowiska

Pakowanie Zestawu II w opakowanie papierowo-foliowe

4	zapakował Zestaw II w rękaw papierowo-foliowy i wykonał zgrzew pierwszej warstwy rękawa						
5	zapakowany w pierwszą warstwę rękawa Zestaw II zapakował w drugą warstwę rękawa papierowo-foliowego nie zginając i nie podkładając opakowania pierwotnego						

Pakowanie Zestawu III w opakowanie papierowo-foliowe

6	umieścił nożyczki chirurgiczne w jednej warstwie rękawa papierowo-foliowego, wykonał zgrzew rękawa						
7	uporządkował stanowisko pracy, wykonał dezynfekcję blatu stanowiska do pakowania narzędzi za pomocą chusteczki dezynfekcyjnej, chusteczkę umieścił w pojemniku na odpady						
8	zjął czepek i umieścił w pojemniku na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis